

**Produkt:      Behandlungs-Station für Schwerbrandverletzte**

**Artikel-Nr.:   MA-5500**

## **SBV-Station für Schwerbrandverletzte mit elektron. Höhenverstellung, Gel-Auflage und Kontroll-Einheit**

**Zur schonenden Erstbehandlung von Schwerbrandverletzten durch neuartiges Wasserdampf-Benetzungs-System**

### **Konzept und Beschreibung**

#### **Beschreibung**

Bestehend aus:

Wanne:


- Material 1.4571 K320 duplo geschliffen
- 4 Stück Hubsäulen + Steuereinheit (Hub 200mm)
- Wanne komplett verkleidet
- In der Wanne ein Rohrgestell für Patientenauflage
- 5-teilige, perforierte Ablagefläche mit verstellb. Kopfteil

Bedienpult:

- Material 1.4571 duplo geschliffen
- Rohrrahmengestell außen mit Blech verkleidet
- Desinfektionseinheit
- Wasser und Elektroversorgung vorinstalliert
- 2 Stück Brauseschläuche (3m) inkl. Anschlusswinkel im Gehäuse
- Brausekopf
- Bedieneinheit für AUF/AB Höhenverstellung der Wanne



MA-5500 SBV Behandlungsstation für Schwerbrandverletzte

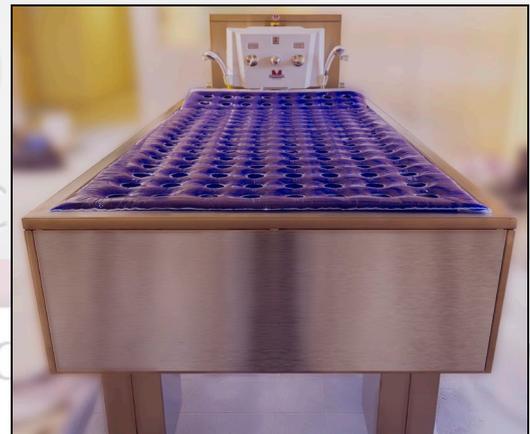

Spezielle Gel-Auflage mit Perforierung für gute Durchdringung des Wasserdampfes.

**Produkt:**      **Behandlungs-Station für Schwerbrandverletzte**

**Artikel-Nr.:**   **MA-5500**

## Funktionen

## Technische Daten

Material: Edelstahl EN / DIN 1.4301 K 320 innen und außen  
Türmaße: 700(B) x 1500(H)mm (lichtes Maß)  
Tür mit gasdicht schließender Viton-Dichtung  
Einschubhöhen vom Fußboden gemessen: 510 / 1010 / 1510mm  
Zuleitung Formalin: ¾ Zoll  
Zuleitung Wasseranschluss: ¾ Zoll  
Abwasserleitung: 1 Zoll  
Gesamtmaße außen: 1045(B) x 2797(L) x 1900(H)mm  
Elektro-Anschluss: 400V / 16A / 3Phasen / 50Hz

## Bauseitige Vorbereitungen

- Wasserebener Fußboden
- Abwasseranschluss 1"
- KW-Zuleitung ¾"
- Wasserdruckreduzierung auf 2 bar
- Wasser-Separator
- Elektro-Anschluss: 400V / 16A / 3Phasen / 50Hz

Installation durch unsere Spezialisten.  
Lieferung inkl. einer Bedienungs- und Serviceanleitung.

## Herstellungsland

Hergestellt in Deutschland von MEDIS MT GmbH gemäß ISO 9001 und den gültigen EN-Normen sowie Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen.



Spüleinheit mit Brausen für Desinfektionslösung (links) und Spülwasser



Kontroll-Einheit mit Schalter für AUF / AB – Höhenverstellung



Stationäres Bedienpult

# Produkt Spezifikation gfw1016

**Produkt:      Behandlungs-Station für Schwerbrandverletzte**

**Artikel-Nr.:   MA-5500**



SBV Behandlungsstation MA-5500 in der Klinik für Schwerbrandverletzte